


# 防護ガウンの作り方

## 45Lポリ袋編

(大きさ650×800mm)

感染予防の推進  
医療・介護の現場の安心のために

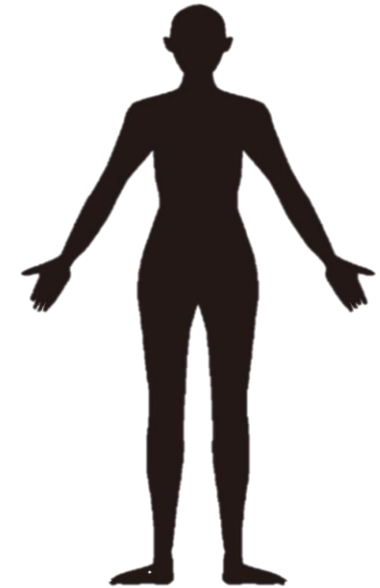

# 防護用ガウン制作のポイント

## 身体を覆うサイズ(大きめ)




- 袖は、手首が隠れるくらいの長さ  
袖は長めに手のひらにかかるくらいがよいでしょう
- 着丈は約110cm、膝が隠れるくらいの長さ

## 制作場所は、清潔に保ちましょう

- テーブルなど、アルコール消毒で拭くなど清潔に保ちましょう
- 制作者は、手指の消毒をしてから作業しましょう
- グループで作業時は、人との距離を取り、3密を避けましょう


# 準備するもの

- 大きなポリ袋を準備 3枚  
45Lタイプ 65×80cm  
(ガウンの大きさとしては、Lサイズ)
- はさみ・カッター
- 養生テープ／クラフトテープ  
5cm幅(一般的に販売されている)
- セロハンテープ

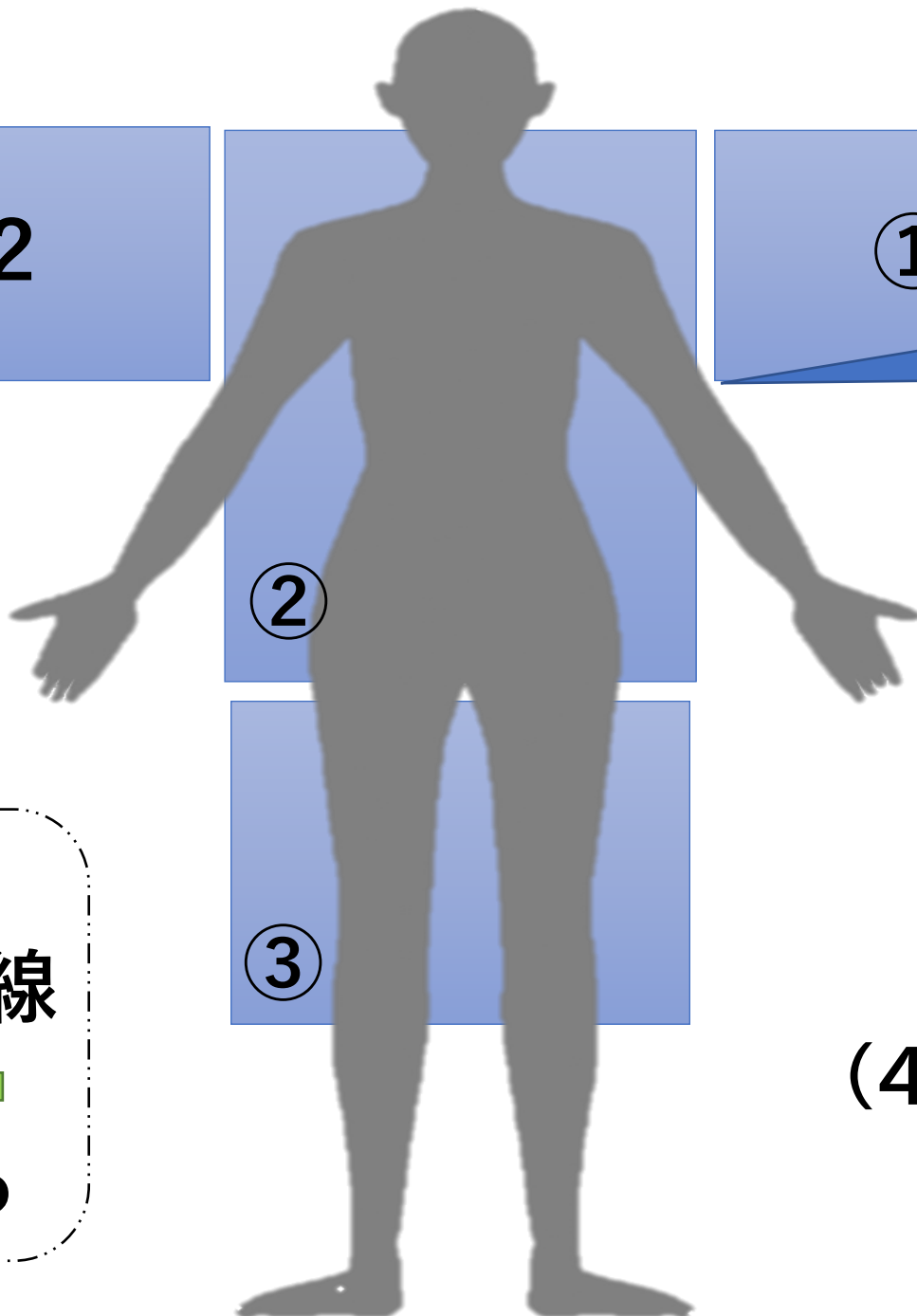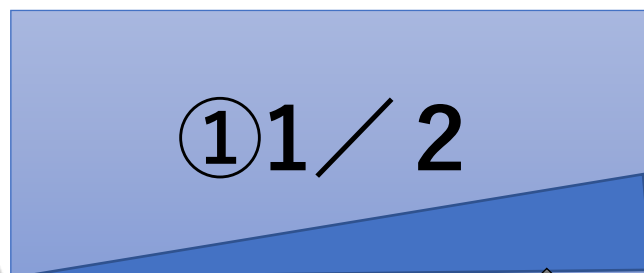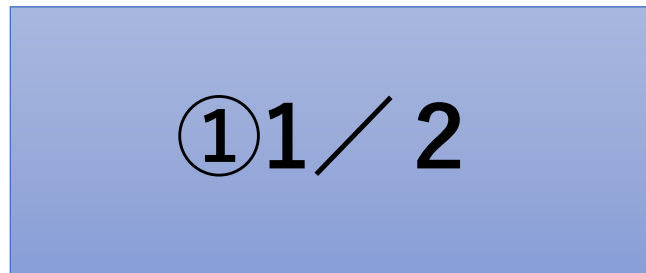

②

③

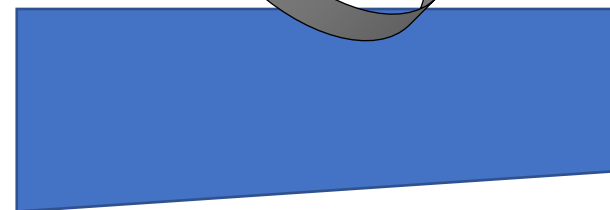

45Lポリ袋  
(65×80cm)  
3枚利用

(45Lのポリ袋3枚使用  
=サイズLの大きさ)


ハサミで切る線




テープを貼る

# 袖部分 短辺を2つに切る


45L(65×80m)袋を使用

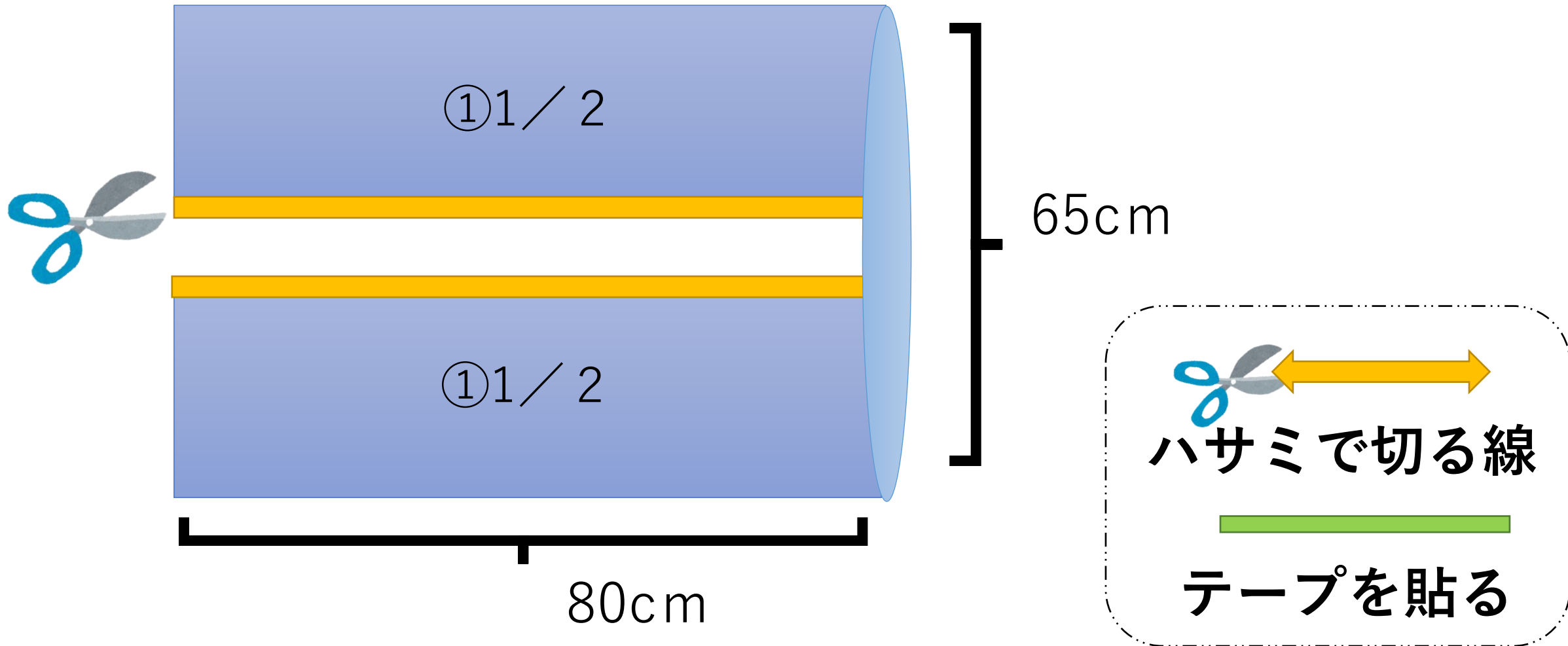


# 胴体部分 首・腕まわり穴をあける

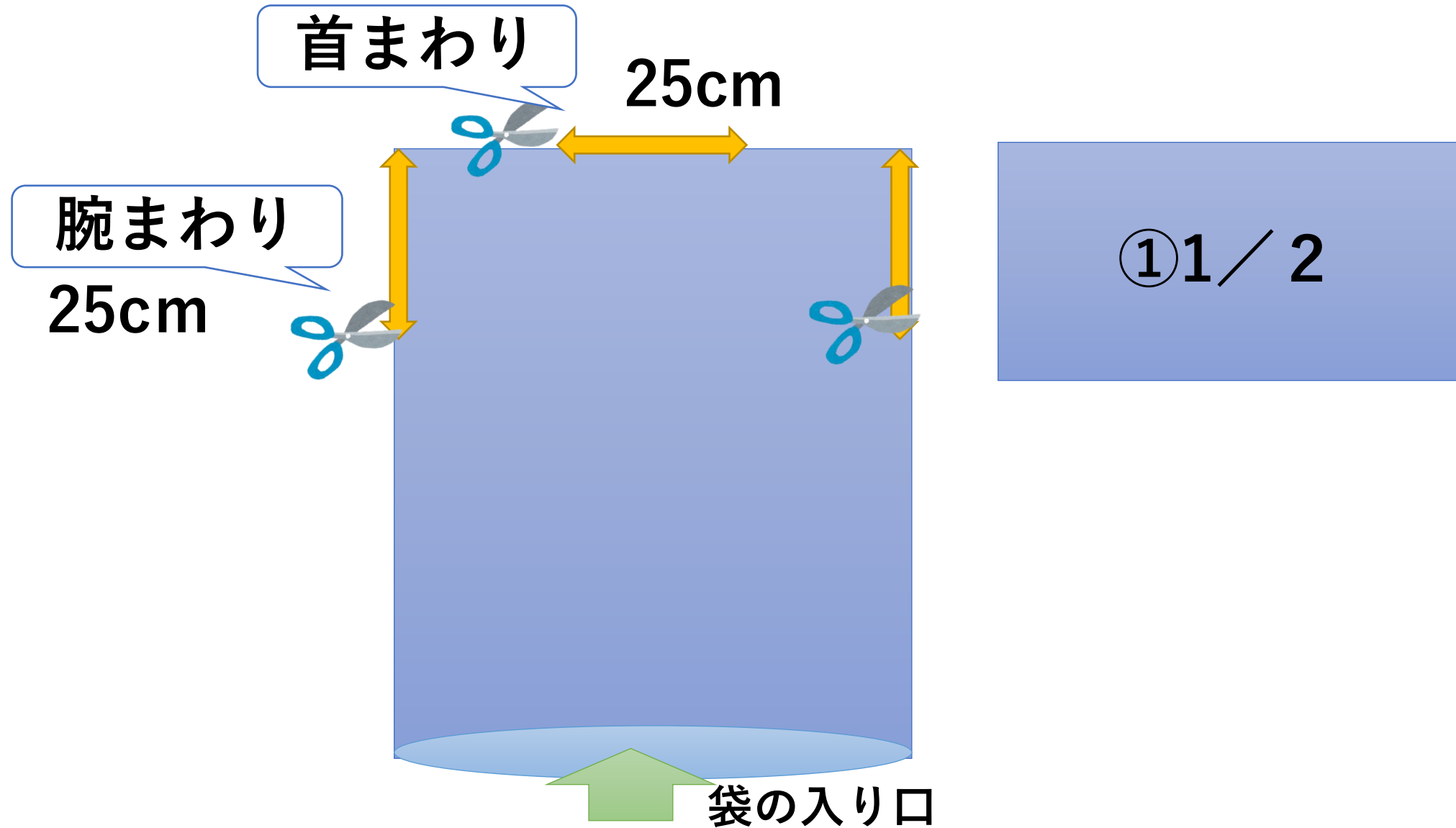

# 腕の部分

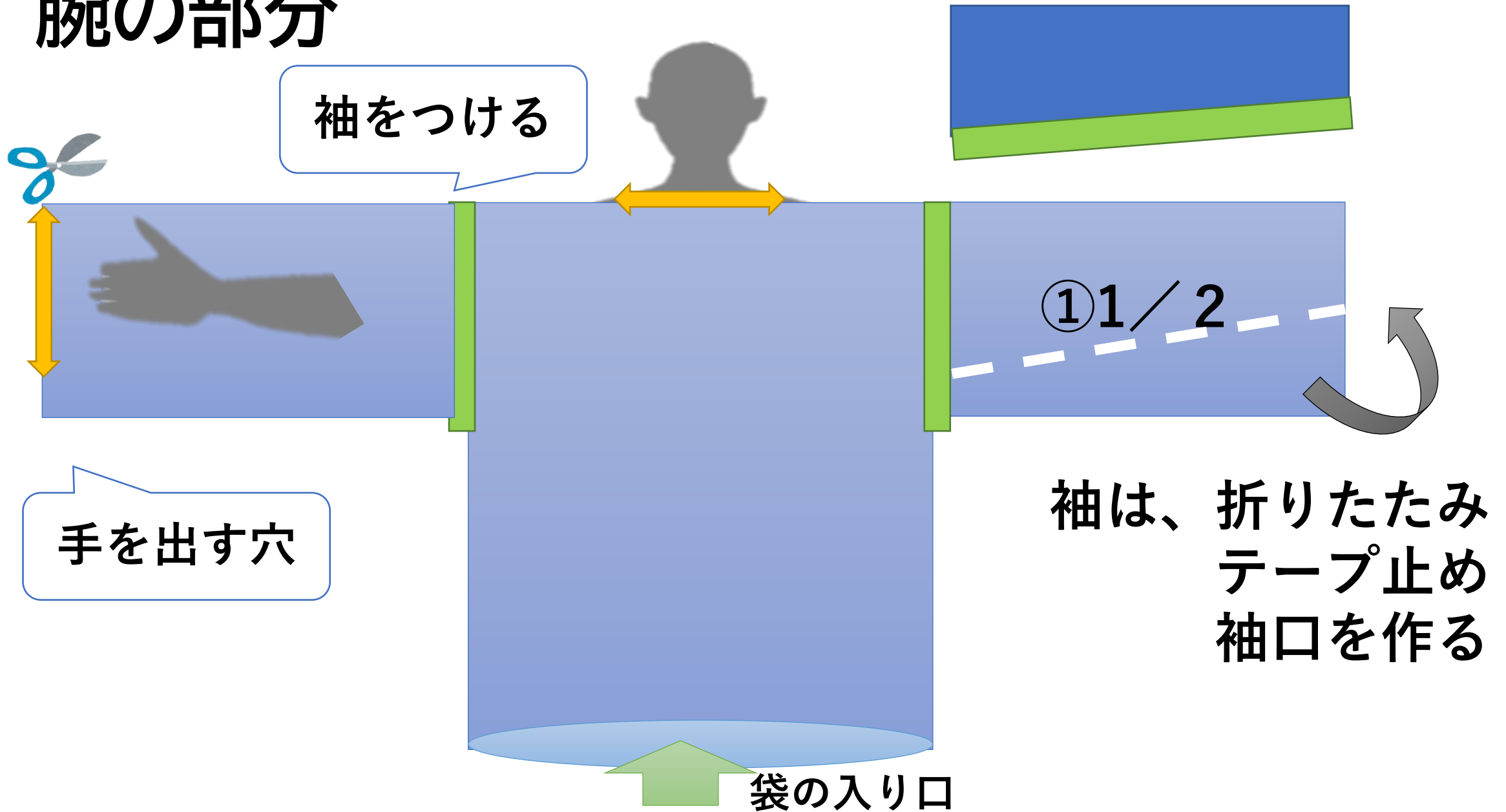

# 胴体部分

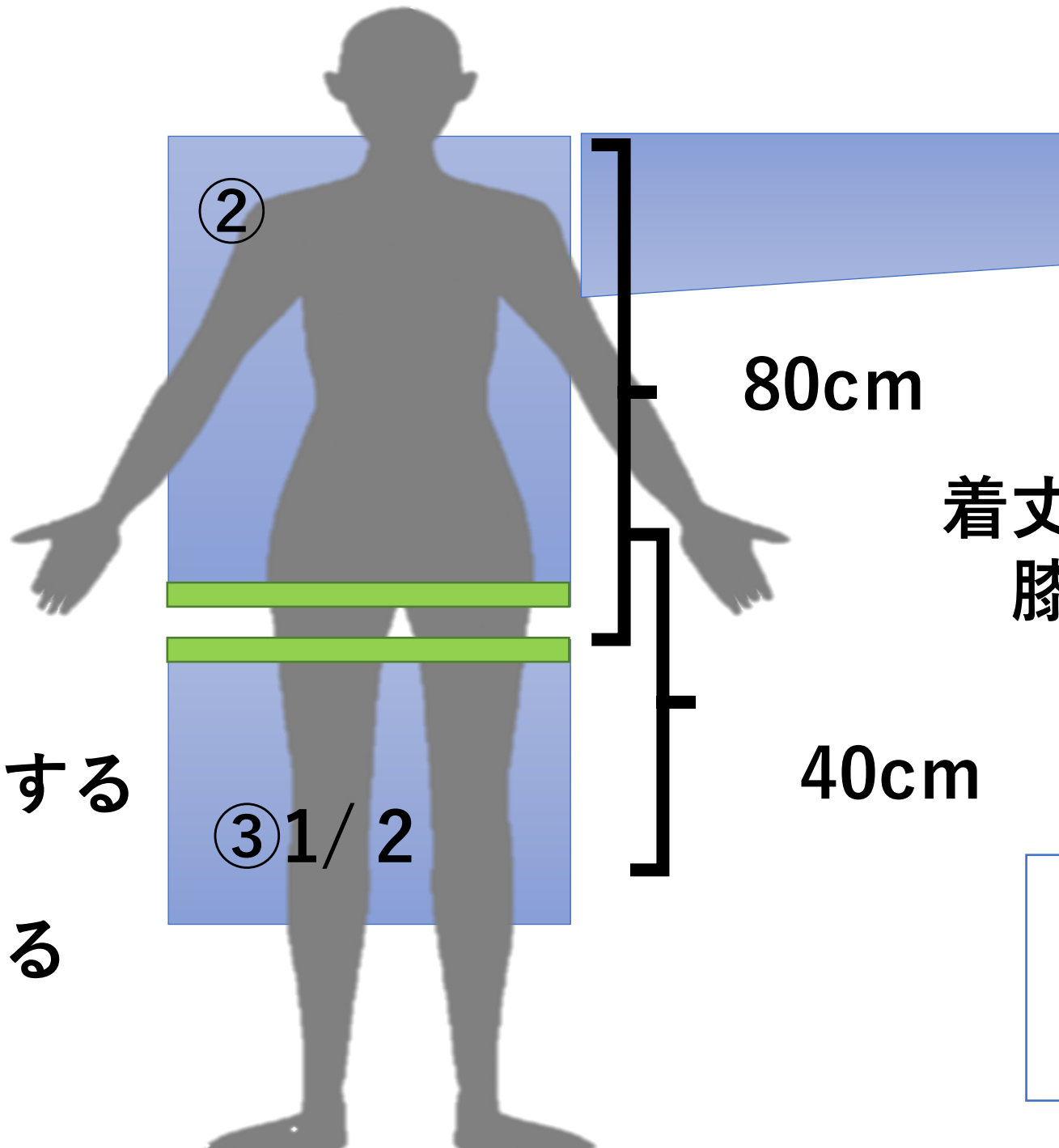

80cm

着丈は約110cm  
膝丈くらい

40cm

袋をつなぎ長くする  
③枚目は  
長軸を半分に切る

③ 1/2

4 5 Lポリ袋  
(65 × 80cm)  
3枚利用



# 背中への加工



※感染予防

⇒脱ぎやすいように加工

割烹着のように  
背中に切れ目を入れる



テープで仮止め

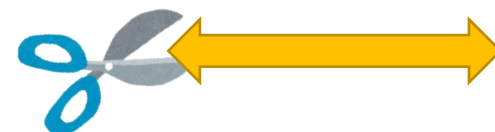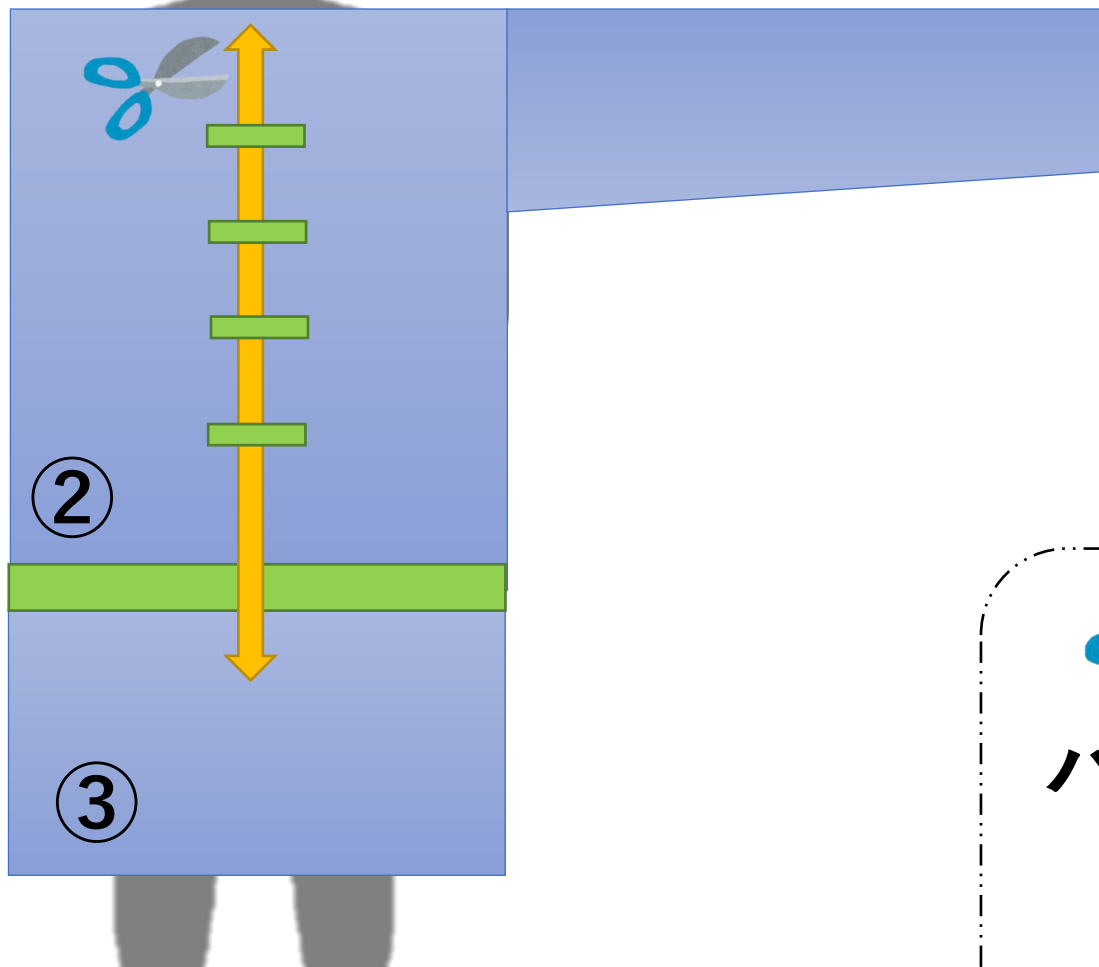

ハサミで切る線



テープを貼る

# 使用時のポイント

- ・手袋・マスクも一緒に利用し、感染を防ぎましょう
- ・1度現場で着用したら、最新注意で取り扱い使い捨てを
- ・着衣時、外側で触れた部分は、内側に包みこんで捨てましょう
- ・着用した手袋・マスクも、同様に脱着しましょう
- ・最後に、手を消毒または、洗いましょう